

Alles Nötige *auf einen Blick*

ProActive® Implantat System Box

- ✓ Wenige Instrumente
- ✓ Leicht zu reinigen und zu sterilisieren
- ✓ Chirurgische und prothetische Instrumente in einer Box

Funktionen und Vorteile

Die Box – kompakte Box, deren Deckel mit nur einer Hand geöffnet und abgenommen werden kann.

Die Trays – haben eine vorgestanzte Halterung, die Ihre Instrumente an ihrem Platz halten.


Das graue Tray enthält das Bohrprotokoll mit NP- und SP-Markierung und Platz zur Aufbewahrung zusätzlicher chirurgischer Instrumente.

Das rote Tray dient zur Organisation und Aufbewahrung prothetischer Instrumente für die einfache Verwendung.

Tiefenmesssonde – Die Sonde ist an beiden Seiten mit Bohrangaben und verschiedenen Funktionen versehen. Eine Seite passt in die Präparationsosteotomie, die mit dem 2,2 mm Durchmesser Bohrer durchgeführt wird. Neben den Tiefenmarkierungen ist ein Kugelende zur haptischen Überprüfung der Knochenoberfläche vorhanden. Mithilfe der anderen Seite wird bei der Präparationsosteotomie, die mit dem 3,0 mm Durchmesser Bohrer und größer durchgeführt wird, die Bohrtiefe überprüft. Der Griff ist so geformt, dass er die ergonomische Handhabung für den Benutzer verbessert.



Tiefenmesssonde

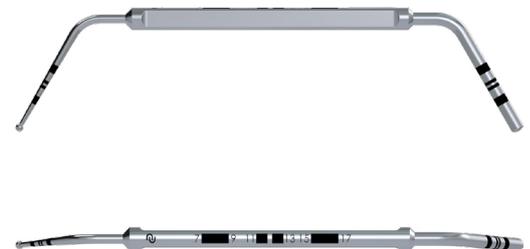


Sortiment

Art. Nr.	Beschreibung
51186	Box für das Neoss ProActive® Implantatsystem
51187	Neoss Chirurgie-Prothetik-Tray – ProActive® Straight
51188	Neoss Chirurgie-Prothetik-Tray – ProActive® Tapered
51189	Neoss Chirurgie-Prothetik-Tray – ProActive® Edge
51190	Tiefenmesssonde


Möglicherweise sind nicht alle Produkte in allen Märkten erhältlich.

Überblick über das chirurgische und prothetische Setup


ProActive® Edge Ø 3,5–5,0 mm

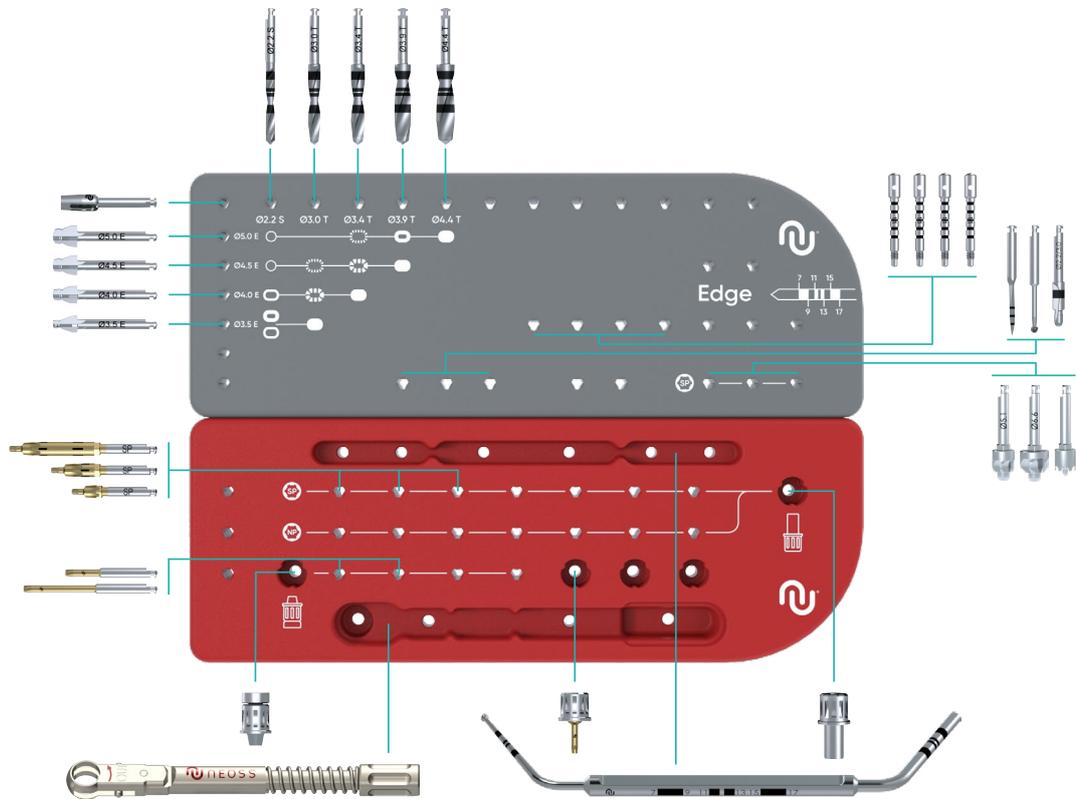

ProActive® Straight Ø 3,5–5,5 mm + ProActive® Straight, NP Ø 3,25

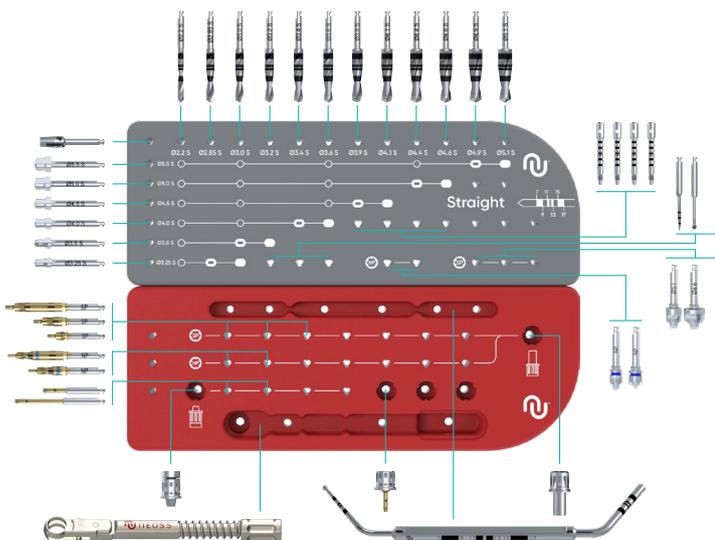

ProActive® Tapered Ø 3,5–5,5 mm

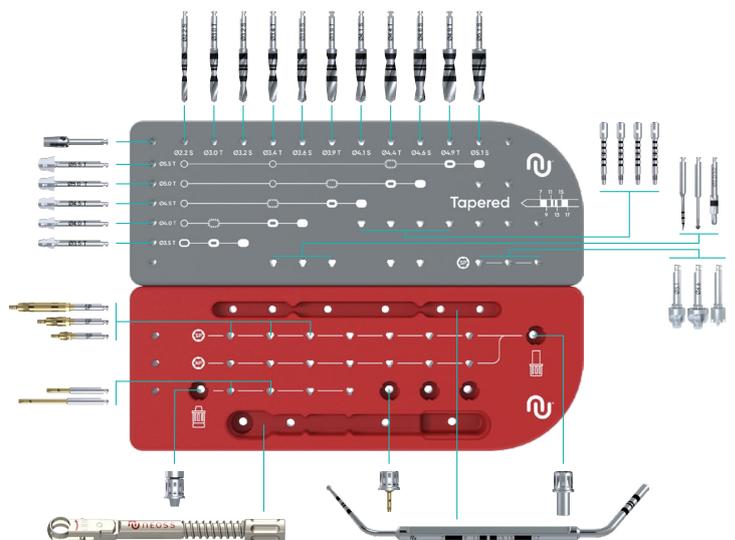

15458_0 DE 2023-01 © Neoss Group, 2023. Urheberrechte, Designrechte und Warenzeichen, Neoss-Dokumente, -Software und -Designs dürfen ohne die schriftliche Genehmigung von Neoss weder ganz noch teilweise nachgedruckt, kopiert oder veröffentlicht werden. Neoss, das N-Logo und NeoScan™ sind Markenzeichen der Neoss Group.