



Kompatibel mit Medentika-Haltern.
Verfügbar in *Titan und CoCr*

Neoss® Medentika Blanks

Flexible Fertigung individueller Abutments mit Präzision, auf die Sie sich verlassen können

Mit Neoss Medentika Blanks fertigen Zahntechniker individuelle Abutments effizient im eigenen Workflow mit Neoss-Originalverbindung. Neoss verbindet digitale Präzision mit einfacher Integration in bestehende Workflows. Das Ergebnis sind Lösungen, die Zeit sparen, Prozesse stabilisieren und sowohl in Praxis als auch im Labor wirtschaftlich funktionieren.




- ✓ **Maximale Gestaltungsfreiheit:** Wählen Sie aus zwei Durchmessern (11,5 mm und 16 mm), um eine breite Palette an individuellen Abutment-Lösungen zu erstellen.
- ✓ **Präzise Verbindung:** Vorgefertigte, hochpräzise Implantat-Abutment-Verbindung mit Neoss-Garantie.
- ✓ **Vereinfachtes Design:** Das spezielle Design ermöglicht eine einfache Anpassung des Emergenzprofils an Ihre spezifischen Anforderungen.
- ✓ **Verfügbare Materialien:** Wählen Sie zwischen Titan oder CoCr.

Vom digitalen Design zum fertigen individuellen Abutment innerhalb eines Tages

Die Neoss Datenbank ist eine eigenständige CAD-Bibliothek, die für die Herstellung individueller Abutments unter Verwendung von vorgefertigten Rohlingen mit der originalen Neoss-Implantat-Verbindung entwickelt wurde. Die Datenbank ist für den Einsatz mit geeigneten Fräsmaschinen vorgesehen und erfordert einen speziellen Rohlinghalter, sowie eine geprüfte CAM-Software, die mit dieser CAD-Bibliothek zusammenarbeitet.

Ihre Vorteile der speziell angefertigten 3shape® & exocad® CAD-Bibliothek

- ✓ Speziell für Neoss Medentika Blanks erstellt.
- ✓ Steuert die Integration mit CAM und der breiten Palette an CAM-Halterungen sowie vorgefrästen Halterungen von Medentika.
- ✓ Kostenloser Download unter: neoss.com/de/cad-libraries

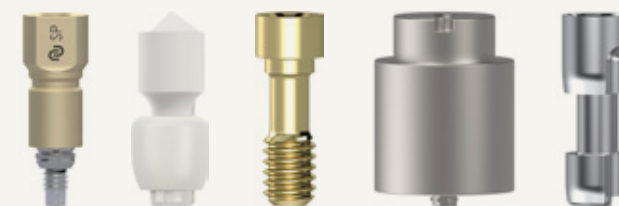


3shape
exocad

Optimierte CAD-Bibliothek für den digitalen Workflow

Individuelle Abutments innerhalb eines Tages herstellen

- ✓ Verbessertes Serviceangebot und hohe Rentabilität durch schnellere Durchlaufzeiten.
- ✓ Schneller Produktionszyklus zur Bearbeitung dringender Fälle und Steuerung des Arbeitsablaufs in eigener Hand.

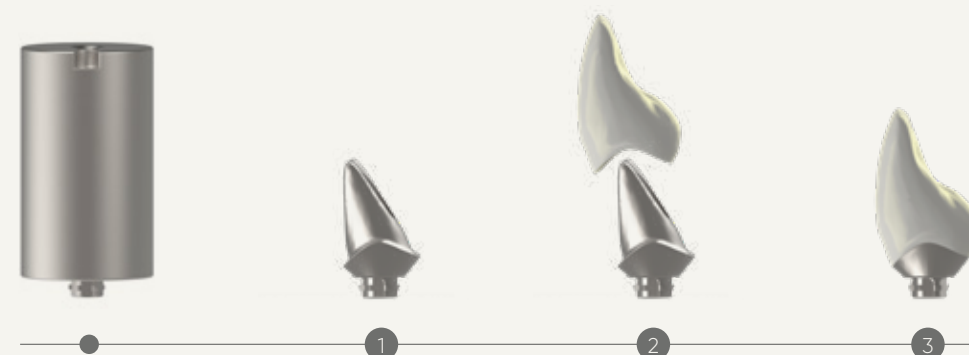

Möglichkeiten zur lokalen Fertigung von individuellen Abutments und Kronen

Universelle Kompatibilität mit führenden CAM-Frässystemen

Medentika-Halter M58

Universell einsetzbar und geformt wie ein standardisierter Materialrohling mit einem Durchmesser von 98 mm.




Kompatibel mit diesen CAM-Maschinen:

- Datron
- Dental Concept DC1/DC5
- ime-icore
- MB Maschinen CobraMill
- Primacon PFM 24 mediMill
- R+K
- Röders RXD
- Sirona inLab MC X5
- VHF
- Wissner Gamma 202
- Yenadent
- DGSHAPE – DWX-42W
- Ivoclar AG
- ARUM DENTISTRY


Amann Girrbach CAM-Maschinen

Für den hochpräzisen Fertigungsprozess wurden spezielle Adapter integriert.


Adapter zur Bearbeitung der Blanks der verschiedenen Hersteller sind bei Amann Girrbach erhältlich und können für die Halter der Fräsmaschinen Ceramill Motion 2/3 & Air, Ceramill Matik sowie Ceramill Matron & Matron Core nachgerüstet werden.

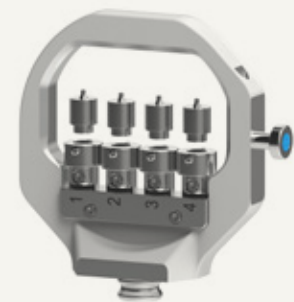

Matron Core

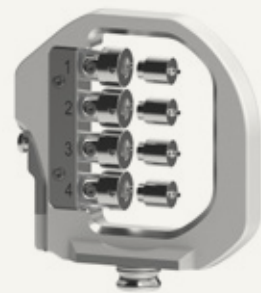

Ceramill Matik

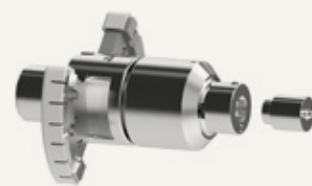

Ceramill Motion 2




Ceramill Motion 3



Über den QR-Code können Sie die Liste mit kompatiblen Maschinen & Softwares aufrufen.

Fräsen Sie bis zu sechs Abutments in einem Durchgang:
Schnellere Fertigung, höhere Effizienz

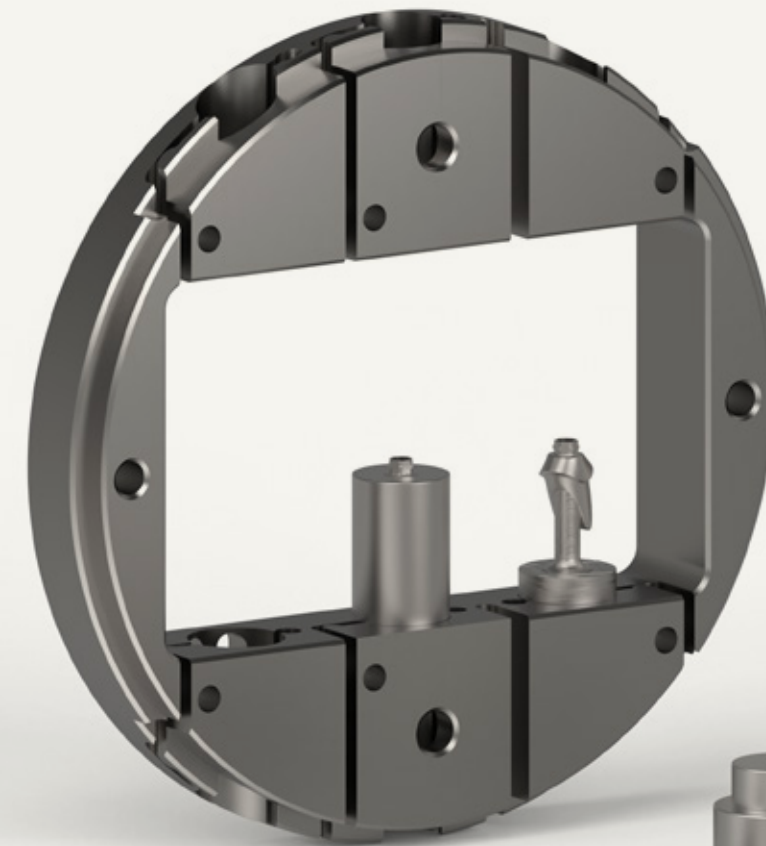

Vorgefertigte Halter

Die vorgefertigten Neoss Medentika Abutment-Halter wurden entwickelt, um Ihren Produktionsprozess zu optimieren, und sind für alle gängigen Maschinenhersteller erhältlich. Die gleichzeitige Bearbeitung von bis zu sechs vorgefrästen Blanks verbessert die Effizienz des Arbeitsablaufs und verkürzt die Produktionszeit.



- ✓ Optimierter Arbeitsablauf: Fräsen Sie bis zu sechs Abutments in einem Durchgang.
- ✓ Vereinfachte Abutmentbefestigung: Befestigen Sie das Abutment mit nur einer Schraube im Halter für einen sicheren und effizienten Arbeitsablauf.
- ✓ Verbesselter Schutz: Ähnlich wie bei den vorgefrästen Abutments schützt das Design des Halters die Implantat-Verbindung beim Festziehen.
- ✓ Weniger Komponenten: Das einfache Design minimiert Produktionsfehler und senkt die Kosten.

Neoss® Medentika Blanks

Jedes 5er-Set enthält je 5 Neo Abutmentschrauben und 5 Neo Laborschrauben. Erhältlich in Titan und Kobalt-Chrom (CoCr).

Art. Nr.	Beschreibung
31488	Neoss® Medentika Blank SSC, Titan Ø11,5 mm, SP – 5 Stück
31489	Neoss® Medentika Blank SSC, Titan Ø16 mm, SP – 5 Stück
31490	Neoss® Medentika Blank SSC, Titan Ø11,5 mm, NP – 5 Stück
31491	Neoss® Medentika Blank SSC, CoCr Ø11,5 mm, SP – 5 Stück
31492	Neoss® Medentika Blank SSC, CoCr Ø11,5 mm, NP – 5 Stück



Neoss® Medentika Blank
SSC, Titan Ø11,5 mm, SP



Neoss® Medentika Blank
SSC, Titan Ø16 mm, SP



Neoss® Medentika Blank
SSC, Titan Ø11,5 mm, NP



Neoss® Medentika Blank
SSC, CoCr Ø11,5 mm, SP



Neoss® Medentika Blank
SSC, CoCr Ø11,5 mm, NP

Neoss GmbH
Im Mediapark 5b
DE-50670 Köln
T: +49 221 96980 10
E: info@neoss.de

Bestellen Sie Ihre Produkte
24/7 in unserem Onlineshop
unter shop-de.neoss.com



Wenden Sie sich an Ihren zuständigen Neoss Ansprechpartner,
um Informationen zu den Produkten zu erhalten. Nicht alle
Produkte sind in allen Märkten erhältlich.

17517_0 DE 26-05 © Neoss Group, 2026. Urheberrechte, Designrechte und Markenzeichen, Neoss-Dokumente, -Software und -Designs dürfen ohne die schriftliche Genehmigung der Neoss Group weder ganz noch teilweise nachgedruckt, kopiert oder veröffentlicht werden. Neoss und das N-Logo sind Markenzeichen der Neoss Group. NeoConnect™, NeoLoc™, NeoPro™, NeoScan™, NeossONE™, NeoGenix XP™, ProActive™ und ScanPeg™ sind Markenzeichen der Neoss Group.