



Favorisci la *crescita ossea verticale*

Membrane NeoGen® Cape in PTFE

Una soluzione semplice per una *crescita ossea verticale predicibile*

La nuova membrana fissata all'impianto in PTFE per dente singolo ha la sua unicità nella geometria anatomica principale e nel modo di fissarla sugli impianti Neoss.

I contorni delle membrane sono personalizzati per ridurre al minimo la necessità di regolare manualmente la forma esterna.

- ✓ Meno passaggi di trattamento grazie al fissaggio diretto all'impianto
- ✓ È utile per le carenze ossee buccali nella zona estetica
- ✓ Flessibilità in altezza con due misure di distanziatore per un'altezza di rigenerazione ossea controllata

NeoGen® Cape Screw

Blocca la membrana sulla parte superiore del distanziatore; una sola tipologia adattabile a tutte le configurazioni del distanziatore

Membrana NeoGen® Cape PTFE

Membrana rinforzata in titanio progettata con foro preforato per il fissaggio all'impianto

NeoGen® Cape Spacer

Si adatta alla connessione dell'impianto, vale a dire una connessione implantare unica



Dott. Christian Schober, DDS
Professione
Città, Austria

Caso clinico

Membrana NeoGen® Cape in PTFE fissata su un impianto posizionato simultaneamente.
(Vedere la serie completa di casi nel Webinar).



Scansiona il codice QR per vedere la serie completa di casi.

Caso clinico

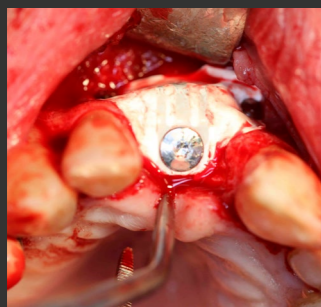


Figura 1. Membrana NeoGen Cape in PTFE fissata su un impianto Neoss ProActive® per il trattamento di un difetto osseo buccale.

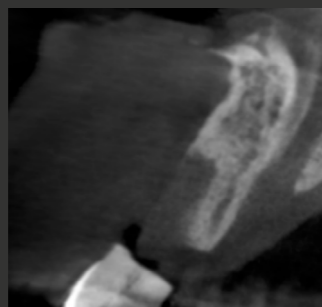


Figura 2. Immagine CBCT della situazione iniziale.

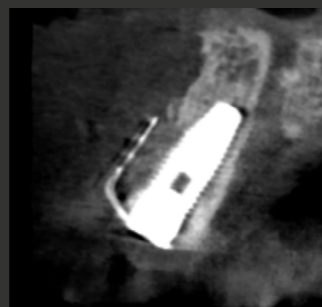
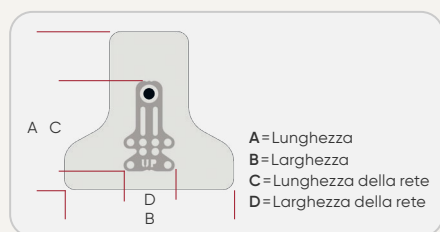


Figura 3. Situazione postoperatoria con impianto e membrana in PTFE NeoGen Cape in posizione.

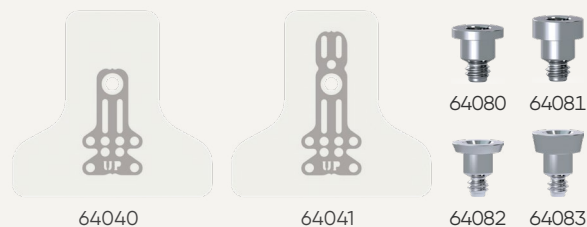


Figura 4. Risultato dopo cinque mesi di guarigione. Notare l'osso buccale rigenerato.

Assortimento



N. art.	Descrizione	A	B	C	D
64040	Membrana NeoGen Cape PTFE – M	28mm	30mm	16mm	9mm
64041	Membrana NeoGen Cape PTFE – L	28mm	30mm	21.6mm	9mm
64080	NeoGen Cape Spacer 0,7 mm SP				
64081	NeoGen Cape Spacer 1,5 mm SP				
64082	NeoGen Cape Spacer 0,7 mm NP				
64083	NeoGen Cape Spacer 1,5 mm NP				



Gamma
NeoGen

Scansiona il codice QR per vedere l'assortimento completo di membrane NeoGen Cape e PTFE.

ITALY OFFICE

Neoss Italia S.r.l

Viale Certosa 138, I-20156 Milano

T: +39 02 92952 1

E: italia@neoss.info

Contattare il rappresentante locale per i dettagli sulla disponibilità del prodotto. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i mercati.

15450_0 IT 23-02 © Neoss Group, 2023. I copyright, i diritti su design e i marchi registrati, i documenti, i software e i design di Neoss non possono essere ristampati, copiati o pubblicati, integralmente o parzialmente, senza l'autorizzazione scritta di Neoss. Neoss, il logo N e NeoScan™ sono marchi registrati di Neoss Group.