

Stellen Sie ein *vertikales
Knochenwachstum* sicher

NeoGen® Cape PTFE-Membranen

Eine einfache Lösung für ein vorhersagbares vertikales Knochenwachstum

Die neue implantatgetragene PTFE-Membran ist für die Einzelzahnversorgung aufgrund ihrer anatomischen Hauptgeometrie, als auch in der Art und Weise, wie sie auf den Neoss-Implantaten befestigt wird, einzigartig.

Die Konturen der Membranen sind so gestaltet, dass eine manuelle Anpassung der äußeren Form nicht erforderlich ist.

- ✓ Weniger Behandlungsschritte dank direkter Befestigung am Implantat
- ✓ Hilfreich bei bukkalem Knochenmangel in der ästhetischen Zone
- ✓ Flexibilität bezüglich der Höhe dank zwei Spacer-Größen für eine kontrollierte Knochenregenerationshöhe

NeoGen® Cape Schraube


Fixiert die Membran oben auf dem Spacer, ein Schraubentyp ist passend für alle Spacer-Konfigurationen

NeoGen® Cape PTFE-Membran

Titanverstärkte Membran mit vorgestanzter Öffnung für die Implantatfixierung

NeoGen® Cape Spacer

Passt in die Zahnimplantatverbindung - eine einzigartige Implantatverbindung

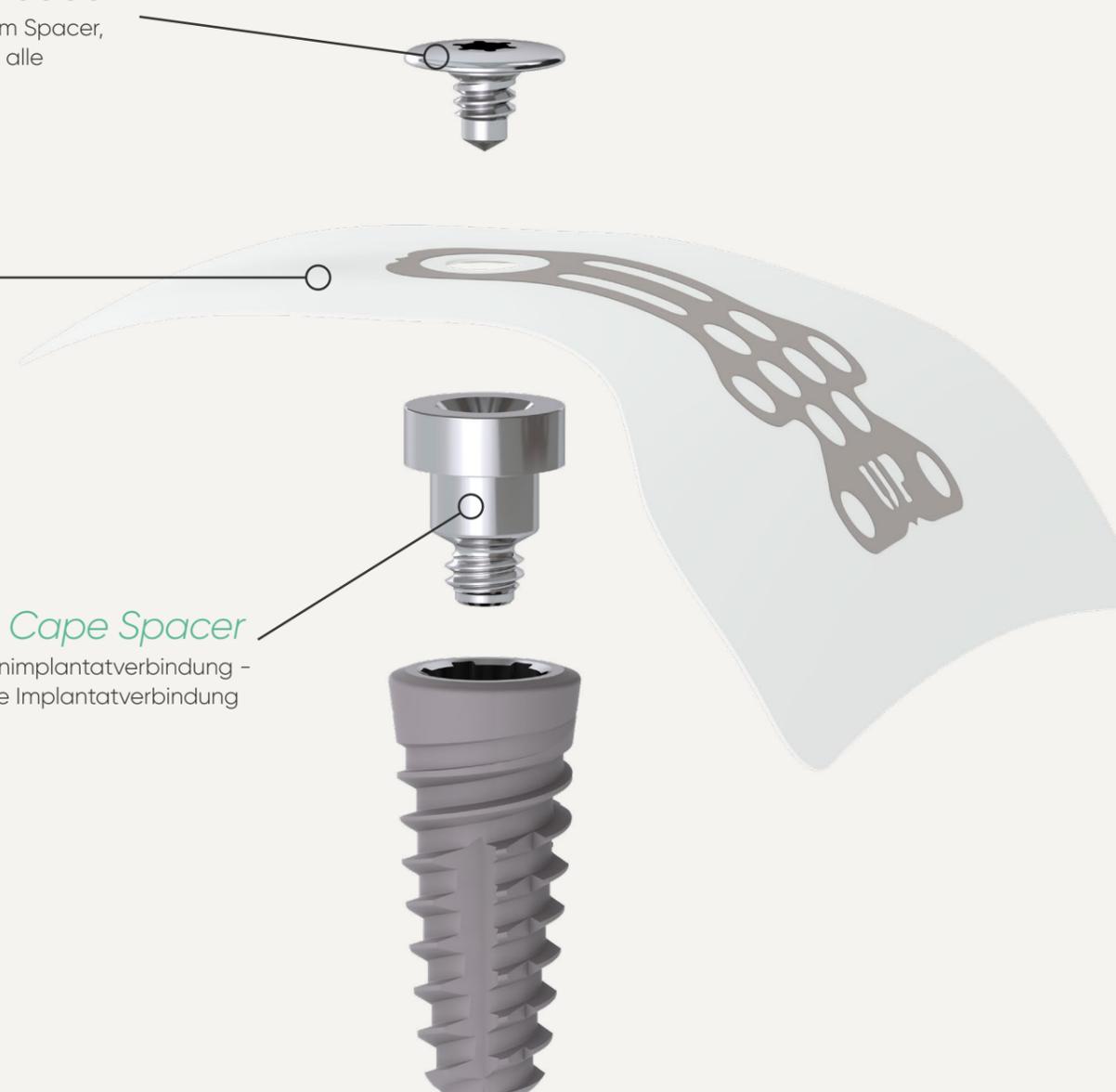

Dr. Christian Schober
Facharzt für ZMK & MKG
Wien, Österreich

Klinischer Fall

NeoGen® Cape PTFE-Membran, fixiert auf einem gleichzeitig eingesetzten Implantat.
(Den vollständigen Fall sehen Sie im verlinkten Webinar)



Scannen Sie den QR-Code, um das verlinkte Webinar anzuschauen.

Webinar

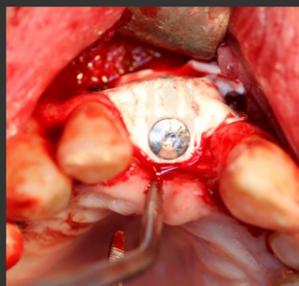


Abbildung 1. NeoGen Cape PTFE-Membran, fixiert auf einem Neoss ProActive® Implantat zur Behandlung eines bukkalen Knochendefekts.



Abbildung 2. CBCT-Aufnahme der Ausgangssituation.

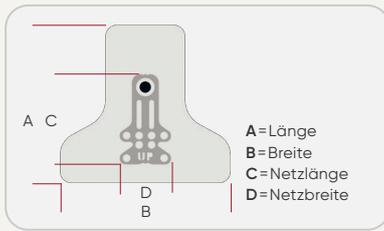


Abbildung 3. Postoperative Situation mit eingesetztem Implantat und eingesetzter NeoGen Cape PTFE-Membran.



Abbildung 4. Ergebnis nach fünfmonatiger Heilung. Beachten Sie den nachgewachsenen bukkalen Knochen.

Sortiment



Art.- Nr.	Beschreibung	A	B	C	D
64040	NeoGen® Cape PTFE-Membran – M	28mm	30mm	16mm	9mm
64041	NeoGen® Cape PTFE-Membran – L	28mm	30mm	21.6mm	9mm
64080	NeoGen® Cape Spacer 0,7 mm SP				
64081	NeoGen® Cape Spacer 1,5 mm SP				
64082	NeoGen® Cape Spacer 0,7 mm NP				
64083	NeoGen® Cape Spacer 1,5 mm NP				



NeoGen
Sortiment

Scannen Sie den QR-Code, um das gesamte Sortiment an NeoGen Cape und PTFE-Membranen anzuzeigen.

Deutschland & Österreich

Neoss GmbH

Im Mediapark 5b, DE-50670 Köln

T: +49 221 96980 10

E: info@neoss.de

Wenden Sie sich an Ihren zuständigen Außendienst, um Informationen zur Produktverfügbarkeit zu erhalten. Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich.

15451_0 DE 23-02 © Neoss Group, 2023. Urheberrechte, Designrechte und Markenzeichen, Neoss-Dokumente, -Software und -Designs dürfen ohne die schriftliche Genehmigung der Neoss Group weder ganz noch teilweise nachgedruckt, kopiert oder veröffentlicht werden. Neoss und das N-Logo sind Markenzeichen der Neoss Group. NeoConnect™, NeoLoc™, NeoPro™, NeoScan™, NeossONE™, ProActive™ und ScanPeg™ sind Markenzeichen der Neoss Group.