




Tillförlitlig stabilitet när du
behöver den

Neoss ProActive[®] Edge

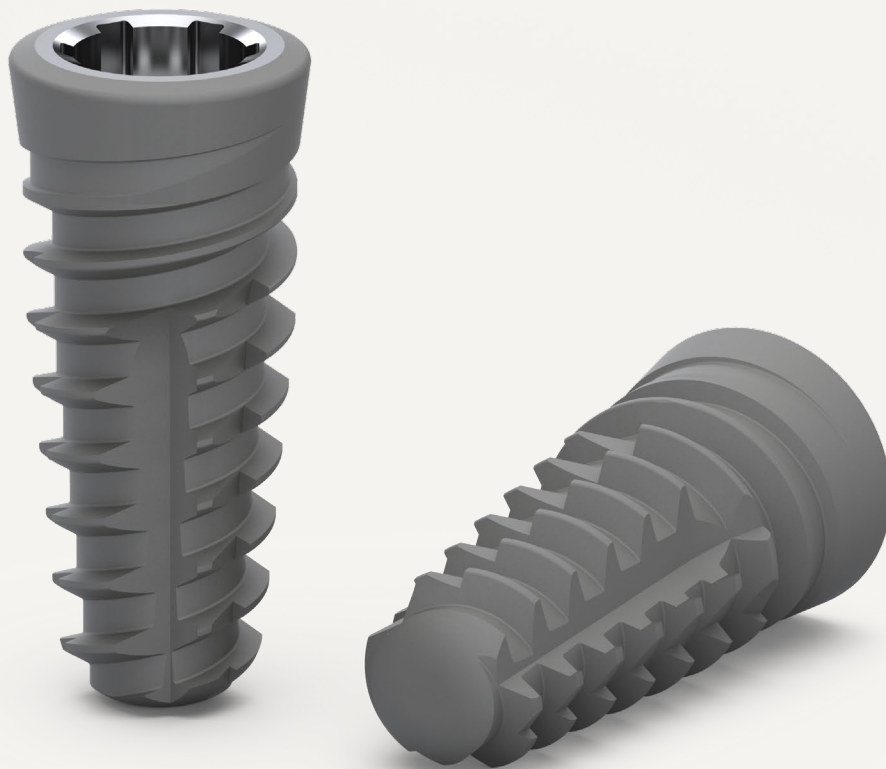

Utformad för att *spara både tid och pengar*




Det förenklade borrhprotokollet har färre arbetsmoment vilket innebär att du sparar både tid och pengar. Tack vare implantatets utformning kan en hög primär stabilitet uppnås i en mängd olika bentyper med ett lyckat resultat.

- ✓ 1–2 borrhsteg
- ✓ Färre arbetsmoment, sparar tid
- ✓ Hög primär stabilitet
- ✓ Tillförlitliga resultat



Erfarenhet och vetenskap har betydelse

Baserat på feedback från fler än 25 tandläkare över hela världen visar Neoss ProActive® Edge fantastiska resultat.

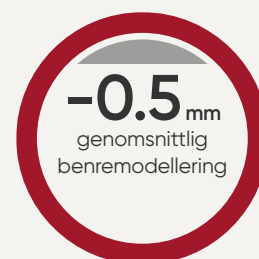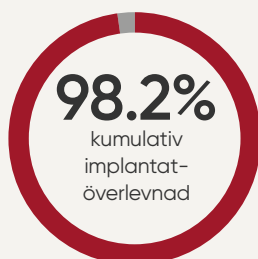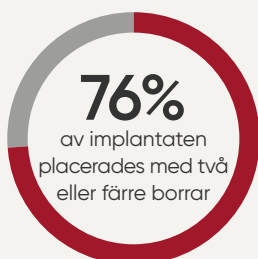

Kliniskt
fall

Skanna QR-koden för att se
hela serien om kliniska fall

Bättre än eller lika bra som branschledande implantat


I en oberoende studie av implantat presterar Neoss ProActive® Edge bättre än eller lika bra som marknadsledande implantat och uppnår högre primär stabilitet, särskilt i överpreparerade områden.



Studie

Stjärnorna säger allt!

Neoss ProActive Edge visar en betydligt högre stabilitet än Straumann® BLX* med alla metoder i alla förberedelser.

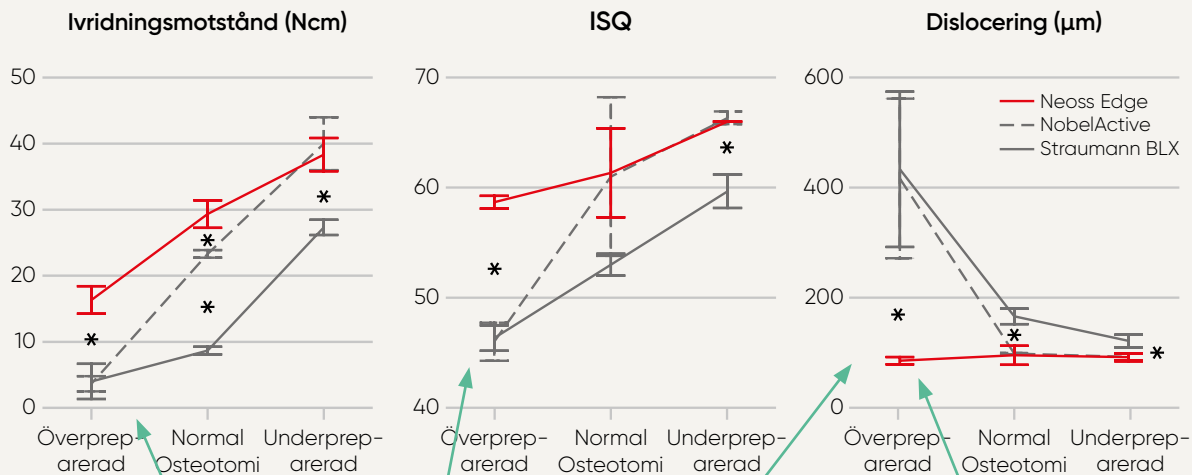

Neoss ProActive Edge har en betydligt högre stabilitet än både Straumann® BLX och NobelActive® i överpreparerade säten.

Skillnaden är förmodligen relaterad till implantatets halsdesign.

Turra M, Petersson A, and Sennerby L. Clin Oral Implants Res. 2020;31(S20):60.



Dr. med. dent. Wim van Thoor
Läkare och tandläkare
Heinsberg, Tyskland

Kliniskt fall

Kliniskt fall som visar extraktion och direktplacering av ett Neoss ProActive Edge-implantat med samtidig benaugmentation med hjälp av THE Graft™ (Purgo). Ett helt digitalt arbetsflöde användes för tillverkning av den slutliga protetiska konstruktionen.



Kliniskt fall



Bild 1. A Ø 5.0 × 13 mm Neoss ProActive Edge implantat installerades i position 24. God primär stabilitet uppnåddes trots den begränsade bensituationen. THE Graft (Purgo) spongiös bensubstans användes för att åtgärda den buckala fenestrationen.

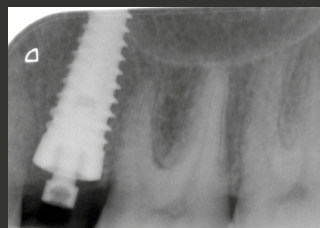


Bild 2. Röntgenbild som visar Edge-implantatet vid tidpunkten för placeringen av implantatet.



Bild 3. En ScanPeg fästes på en Estetik Läkdistans och sätet skannades digitalt med en intraoral skanner.



Bild 4. Slutlig konstruktion vid leveranstillfället. En individualiserad Zirconia-distans tillverkades på en Neoss TiBase och en zirconiakrona monterades på distansen.

Varför Neoss ProActive® Edge?



Genom att använda Neoss ProActive Edge sparar du både tid och pengar. Tack vare NeossONE-plattformen behöver du inte ha ett så stort lager på praktiken. Samtidigt kommer du att ha ett tillförlitligt implantat och med över 10 års kliniska data.

Neoss ProActive® yta

Över 10 års kliniska data
och 98.6% överlevnad

ProActive är en modern superhydrofil och mycket ren implantat-yta som introducerades redan 2009. Den har en bevisad klinisk framgång och backas upp av data över en lång tidsperiod¹.

- ✓ Ultraren, superhydrofil och magnesiumjonberikad
 - En förbättrad och ökad styrka hos osseointegration²
 - Bibehöll implantatets stabilitet under läkning³
- ✓ Definierad dubbel yta (blästrad och etsad) med lägre ytråhet vid implantatkragen
 - Stabila bennivåer över tid – bibehållen bennivå⁴
 - 10-års kliniska data från > 1 200 patienter som visar > 98 % kumulativ överlevnad^{4,5,6}

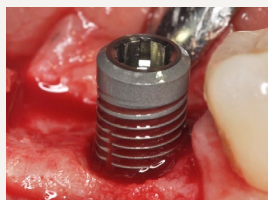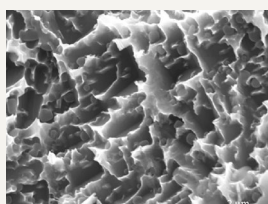

Maskinbearbetad yta
vid anslutning



Superhydrofil
och ultraren

1 Engman F et al. Letters Impl Dent. 2022;2:6–11.
2 Sennerby L et al. Letters Impl Dent. 2017;1:7–10.
3 Vanden Bogaerde L et al. Int J Dent. 2016;84:24931.
4 Sahlin H et al. Letters Impl Dent. 2022;2:18–24.
5 Sennerby L et al. Letters Impl Dent. 2022;2:29–32.
6 Hassfurth N et al. Clin Oral Implants Res. 2021;32(S22):156–157.



NeossONE™

Spara tid med endast en protetisk plattform

är en lösning som är unik för Neoss implantatsystem – en protetisk plattform, tre implantatdesigner. Enkelt uttryckt passar samma protetiska komponenter till alla implantat. Fördelarna är tydliga: Behandlingstiden minskar och lagerhanteringen och behandlingsresultaten optimeras.

- ✓ Färre arbetsmoment sparar tid
- ✓ Mindre lager och maximal flexibilitet
- ✓ Kostnadseffektiv lösning för alla
- ✓ En protetisk plattform för över 70 implantat



NeoLoc®

En stark *och tätslutande anslutning*

Med över 20 års bevisad klinisk framgång är NeoLoc-implantat på distansanslutningar en anmärkningsvärd stark och tätsittande anslutning.

- ✓ En stark och åtsittande anslutning
- ✓ Bevisad klinisk framgång över lång tid
- ✓ Höga nivåer av benkonservering


Valet är ditt

Med oss kan du välja det implantatpaket du vill ha till de läkningsalternativ du föredrar.

Neoss ProActive Edge med täckskruv är optimal för fall med direkt-placering.

Neoss-implantat

Implantatkitet innehåller implantat och täckskruv.

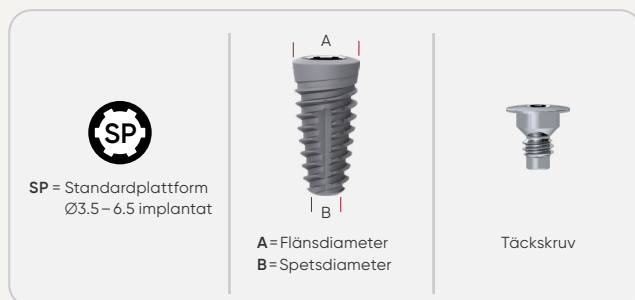

Neoss ProActive Edge-kitet är ett perfekt val när du vill vara flexibel med flera alternativ.

Neoss implantatkit

Implantatkitet innehåller implantat, täckskruv, läkdistanser i PEEK i två olika storlekar och läkdistansskruv.



Preparation av sätet

		ProActive Edge Ø3.5 mm	ProActive Edge Ø4.0 mm	ProActive Edge Ø4.5 mm	ProActive Edge Ø5.0 mm
Ø2.2 S	Ø2.2 S	○ ○	○	○	○
Ø3.0 T	Ø3.0 T	●	⊗	⊗	⊗
Ø3.4 T	Ø3.4 T		●	⊗	⊗
Ø3.9 T	Ø3.9 T			●	○
Ø4.4 T	Ø4.4 T				●
Försänkare Ø4.0 E		Ø3.5 E	Ø4.0 E	Ø4.5 E	Ø5.0 E
Benkvalitet	○ ⊗ Mjuk IV & III	○ ⊗ Normal II	● Hårt I		

Exempel, Ø4.5 ProActive Edge-implantat


Mjukt ben (IV & III)	Normalt ben (II)	Hårt ben (I)
○	○	●
Ø2.2 S	Ø2.2 S	Ø2.2 S
Ø3.0 T	Ø3.4 T	Ø3.9 T

Obs! Om en markering är streckad ⊗ är den inte obligatorisk, såvida det inte är det sista förberedelsesteget. Mer information om alla aspekter av proceduren finns i bruksanvisningen.

Vi rekommenderar att försänkaren används.

Digital Enkelhet för dig och dina patienter


Att använda ett enkelt digitalt arbetsflöde medför att du sparar tid, förbättrar tillförlitligheten och bidrar till att patienterna får de bästa funktionella och estetiska resultaten.

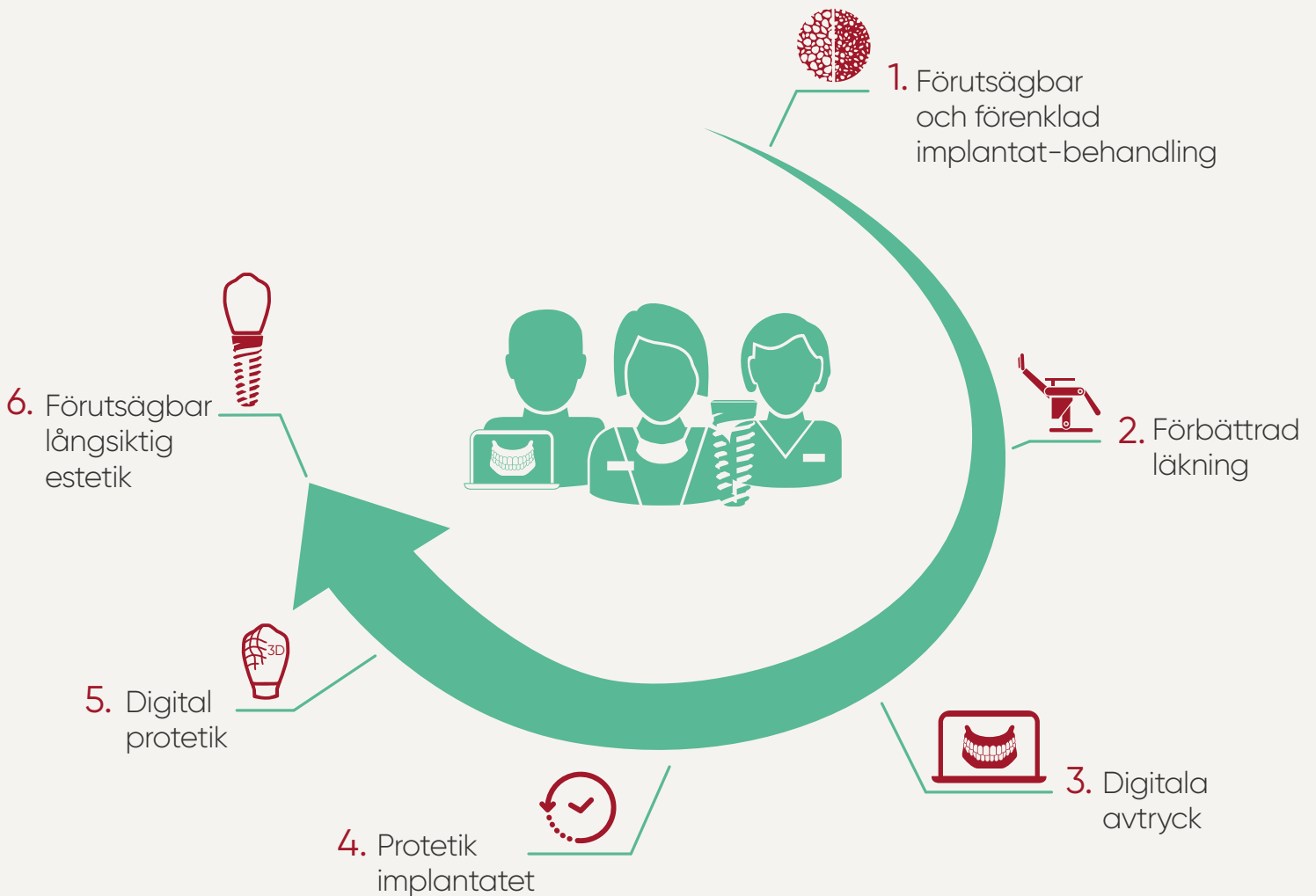

Sortiment

Art. Nr.	Beskrivning	Art. Nr.	Beskrivning	A	B
21417	Implantat – Neoss ProActive Edge Ø3.5×9 mm	21301	Implantsats – Neoss ProActive Edge Ø3.5×9 mm	4.0mm	1.6mm
21418	Implantat – Neoss ProActive Edge Ø3.5×11 mm	21302	Implantsats – Neoss ProActive Edge Ø3.5×11 mm		
21419	Implantat – Neoss ProActive Edge Ø3.5×13 mm	21303	Implantsats – Neoss ProActive Edge Ø3.5×13 mm		
21420	Implantat – Neoss ProActive Edge Ø3.5×15 mm	21304	Implantsats – Neoss ProActive Edge Ø3.5×15 mm		
21423	Implantat – Neoss ProActive Edge Ø4.0×9 mm	21305	Implantsats – Neoss ProActive Edge Ø4.0×9 mm	4.3mm	1.9mm
21424	Implantat – Neoss ProActive Edge Ø4.0×11 mm	21306	Implantsats – Neoss ProActive Edge Ø4.0×11 mm		
21425	Implantat – Neoss ProActive Edge Ø4.0×13 mm	21307	Implantsats – Neoss ProActive Edge Ø4.0×13 mm		
21426	Implantat – Neoss ProActive Edge Ø4.0×15 mm	21308	Implantsats – Neoss ProActive Edge Ø4.0×15 mm		
21429	Implantat – Neoss ProActive Edge Ø4.5×9 mm	21309	Implantsats – Neoss ProActive Edge Ø4.5×9 mm	4.9mm	2.2mm
21430	Implantat – Neoss ProActive Edge Ø4.5×11 mm	21310	Implantsats – Neoss ProActive Edge Ø4.5×11 mm		
21431	Implantat – Neoss ProActive Edge Ø4.5×13 mm	21311	Implantsats – Neoss ProActive Edge Ø4.5×13 mm		
21432	Implantat – Neoss ProActive Edge Ø4.5×15 mm	21312	Implantsats – Neoss ProActive Edge Ø4.5×15 mm		
21435	Implantat – Neoss ProActive Edge Ø5.0×9 mm	21313	Implantsats – Neoss ProActive Edge Ø5.0×9 mm	5.4mm	2.4mm
21436	Implantat – Neoss ProActive Edge Ø5.0×11 mm	21314	Implantsats – Neoss ProActive Edge Ø5.0×11 mm		
21437	Implantat – Neoss ProActive Edge Ø5.0×13 mm	21315	Implantsats – Neoss ProActive Edge Ø5.0×13 mm		
21438	Implantat – Neoss ProActive Edge Ø5.0×15 mm	21316	Implantsats – Neoss ProActive Edge Ø5.0×15 mm		

Alla läkdistanser från "implantatkitet" finns även tillgängliga separat.
Se även produktbladet med fullt sortiment och artikelnummer.

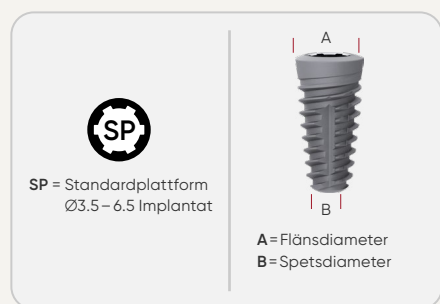

SVERIGE, DANMARK, NORGE KONTORET

Neoss Norden AB

Arvid Wallgrens backe 20

SE-413 46 Göteborg

T: +46 (0)31 88 12 80

E: info@neoss.se

Kontakta din lokala representant för information om produktens tillgänglighet. Alla produkter finns inte i alla länder.

12702_0 SE 23-02 © Neoss Group, 2023. Upphovs rättigheter, designrättigheter och varumärken, Neoss-dokument, program och designers får inte tryckas på nytt, kopieras eller publiceras helt eller delvis utan Neoss skriftliga tillstånd. Neoss, N-logotypen och NeoScan™ är varumärken som tillhör Neoss Group.