



Le *uniche macchine per impronte digitali* di cui hai bisogno

NeoScan™



NOVITÀ NeoScan 2000
Scanner Intraorale wireless



NeoScan 1000

Intelligent Simplicity



Migliora l'esperienza del tuo paziente con precisione e velocità a prezzi accessibili

Ti presentiamo NeoScan™ 1000 e il nuovo NeoScan™ 2000 wireless, la coppia dinamica che ridefinisce l'accessibilità alle impronte digitali. Che tu preferisca uno scanner cablato o wireless, queste macchine versatili soddisfano tutte le tue esigenze per impronte digitali. Con la capacità di generare formati di file STL e PLY comuni, la condivisione diventa perfetta grazie alla loro architettura a sistema aperto. Abbraccia subito il futuro dell'odontoiatria!

Protesi su impianto

Sistema aperto per impronte implantari digitali

PILASTRI,
PONTI E BARRE



Allineatori trasparenti

Per la progettazione di modelli 3D (formato STL/PLY)

ORTODONZIA DIGITALE



CORONE E
PONTI CON PRE-
PREPARAZIONE A
LIVELLO DEI DENTI

Sistema aperto per *corone e ponti*

Per tutte le indicazioni

APPARECCHI PER IL SONNO

Dispositivi *orali per il sonno*

Per la progettazione di modelli 3D (formato STL/PLY)



Servizio *cloud integrato*

Per la gestione dei pazienti e dei partner di laboratorio

1 TB MEMORIA GRATUITO

Veloce, preciso e di facile utilizzo. A *te la scelta*

NeoScan™ 1000

Il NeoScan 1000 è stato progettato con lo scopo specifico di semplificare il flusso di lavoro digitale, garantendo prestazioni rapide, accurate e di facile utilizzo. Questo scanner avanzato offre una qualità eccezionale, ma anche un notevole valore per il tuo investimento, poiché elimina qualsiasi preoccupazione relativa a licenze o costi aggiuntivi.

- ✓ Facile da usare
- ✓ Leggero
- ✓ Scansione rapida e precisa
- ✓ Prezzo interessante senza alcun costo di licenza
- ✓ Non necessita di calibrazione

È facile da condividere tra le poltrone odontoiatriche grazie alla semplice connessione USB che non richiede una fonte di alimentazione separata.



1 TB DI
MEMORIA
CLOUD
GRATUITO

NeoScan™ 2000 Wireless

Il nuovo scanner intraorale wireless offre un'esperienza digitale eccezionale, paragonabile al NeoScan 1000. Offre l'ulteriore vantaggio di una mobilità illimitata, consentendo l'acquisizione senza sforzi anche delle aree prossimali più difficili. Utilizzando il NeoScan 2000, puoi portare l'efficienza e la precisione del tuo studio dentistico a un nuovo livello superiore.

- ✓ Facile da usare con connettività a lungo raggio
- ✓ Durata della batteria due volte maggiore rispetto ai marchi leader del mercato*
- ✓ Leggero
- ✓ Prezzo interessante senza alcun costo di licenza
- ✓ Non necessita di calibrazione

*La scansione continua per un'intera giornata, circa 60 casi, può essere ottenuta con una singola ricarica. La modalità sospensione viene attivata quando è inutilizzato, ma si riattiva istantaneamente se necessario.

La rivoluzionaria *soluzione 2 in 1* *pronta all'uso*

I pilastri di guarigione estetici con ScanPeg combinano pilastro di guarigione e pilastro di scansione in una rivoluzionaria soluzione 2 in 1. Si tratta di una procedura semplificata, confortevole per il paziente e semplicissima per una scansione intraorale accurata, che preserva i tessuti molli e mantiene il sigillo biologico poiché evita la rimozione del pilastro di guarigione per la scansione. Consente di realizzare restauri mono e multi impianto.



Posizionamento dello ScanPeg

Lo ScanPeg viene fornito insieme al pilastro di guarigione estetico ed è facile da applicare e rimuovere.



Impronta digitale con NeoScan

L'impronta digitale intraorale può essere presa in qualsiasi momento. La geometria dello ScanPeg è inclusa nelle librerie CAD di Neoss.



Posizionamento del ponte definitivo

Tutti i contorni dei pilastri di guarigione estetici sono inclusi nelle librerie CAD Neoss per progettare il profilo di emergenza dal contorno del paziente al restauro finale.

exocad 3shape



ScanPeg™



NeoScan™

Caso clinico

Flusso di lavoro completamente digitale con Pilastri di guarigione estetici con ScanPeg, scansione intraorale con NeoScan e progettazione CAD della protesi personalizzata. Guarda la procedura per saperne di più.



Caso clinico



Marcus Dagnelid, DDS
Specialista in protesi dentaria
Göteborg, Svezia



Figura 1. Impianto Neoss ProActive Edge in posizione 14 con Pilastro di guarigione estetico.



Figura 2. ScanPeg montato su Pilastro di guarigione estetico. La scansione intraorale viene eseguita con NeoScan.



Figura 3. Il file di scansione viene inviato al laboratorio per la realizzazione della protesi definitiva.



Figura 4. Protesi definitiva, pilastro e corona personalizzati, al momento del posizionamento.



Caso clinico

Posizionamento di impianti Neoss e gestione del flusso di lavoro digitale utilizzando lo Scan Body tradizionale e la scansione intraorale.



Caso clinico



Kavir N. Shah, BDS, MFDS RCS
Specialista in protesi dentaria
Londra, Regno Unito



Figura 1. Scan Body Elos posizionato sull'impianto Neoss ProActive - vista palatale, mascellare.



Figura 2. Scansione intraorale con NeoScan, vista del software NeoPro.



Figura 3. Radiografia del pilastro e della corona personalizzati in posizione.



Figura 4. Vista vestibolare, restauro finale della corona implantare in posizione.

Confronto – NeoScan 1000

I nostri scanner intraorali si distinguono come i dispositivi più piccoli e più leggeri sul mercato; tuttavia, vantano un potenziale immenso. Grazie a un design con impugnatura a penna, si adattano comodamente alla mano, riducendo al minimo l'affaticamento anche dopo un'intera giornata di presa d'impronta.




Scanner cablati

	NeoScan 1000	CEREC Primescan*	Medit i700 Wired*	DEXIS IS 3700*	TRIOS 3 Wired*
Peso batteria inclusa	198 g	524 g	245 g	316 g	340 g
Lunghezza dello scanner	22,5 cm/ 8,8 in	25,3 cm/ 9,96 in	24,8 cm/ 9,8 in	21,8 cm/ 8,6 in	27,3 cm/ 10,7 in
Immagini al secondo	80	50,000	70	10	1,875

* CEREC Primescan è un marchio di Dentsply Sirona, Medit è un marchio di Medit Corp, Dexis è un marchio di Envista Holdings Corporation, 3Shape è un marchio di 3Shape A/S, Aoralscan 3 è un marchio di Shining 3D.

Confronto – NeoScan 2000 Wireless

Scanner wireless

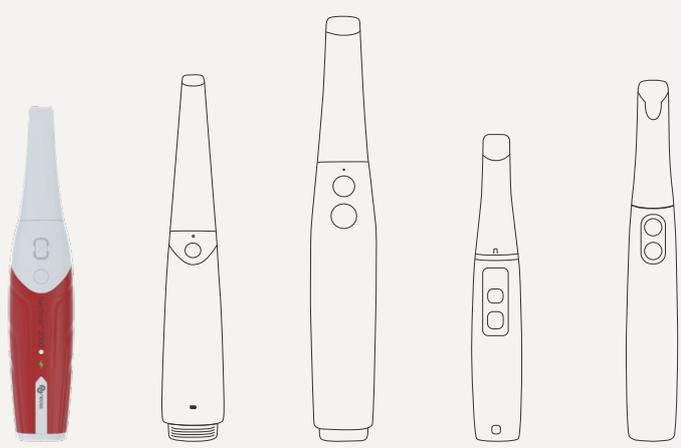

	NeoScan 2000	Aoralscan 3 Wireless*	Medit i700W*	DEXIS IS 3800W*	TRIOS 5 Wireless*
Peso batteria inclusa	245g	330g	328g	240g	299g
Lunghezza dello scanner	24,8 cm/ 9,8 in	27,0 cm/ 10,7 in	31,3 cm/ 12,3 in	22,6 cm/ 8,9 in	26,6 cm/ 10,5 in
Immagini al secondo	80	30	70	12	2,400
Durata della batteria fino a	120 min	120 min	60 min	60 min	66 min



Soluzioni gratuite con i tuoi scanner per rendere *l'odontoiatria digitale semplice e conveniente*

Quando investi in NeoScan, ricevi il pacchetto completo, incluso il software NeoPro e il servizio cloud NeoConnect. Usi questi strumenti essenziali senza alcun costo aggiuntivo per licenze o archiviazione cloud. Sperimenta un'integrazione perfetta e massimizza il potenziale del tuo scanner senza altri costi.



Software NeoPro®

NeoPro rende le tue impronte digitali facili e veloci. Si tratta di un sistema aperto senza costi di licenza software. Comprende, tra l'altro, la gestione della cronologia delle scansioni, promemoria intelligenti e aggiornamenti software gratuiti.



- ✓ Scansione ottimizzata di superfici metalliche e lucide
- ✓ Rilevamento automatico delle linee di margine
- ✓ Istantanee del quadrante per allineatori
- ✓ Analisi occlusale e controllo dei sottosquadri

Servizio cloud NeoConnect®


NeoConnect è stato studiato per migliorare l'efficienza del flusso di lavoro. Offre un processo ottimizzato, efficiente e sicuro per il trasferimento dei dati e la comunicazione con il laboratorio.



- ✓ 1 TB di memoria GRATUITO, senza costi aggiuntivi
- ✓ Aggiungi tutti i dati del paziente di cui hai bisogno
- ✓ Processo ottimizzato con i tuoi partner di laboratorio
- ✓ Conformità completa per la privacy dei dati



Semplicità digitale per te e i tuoi pazienti

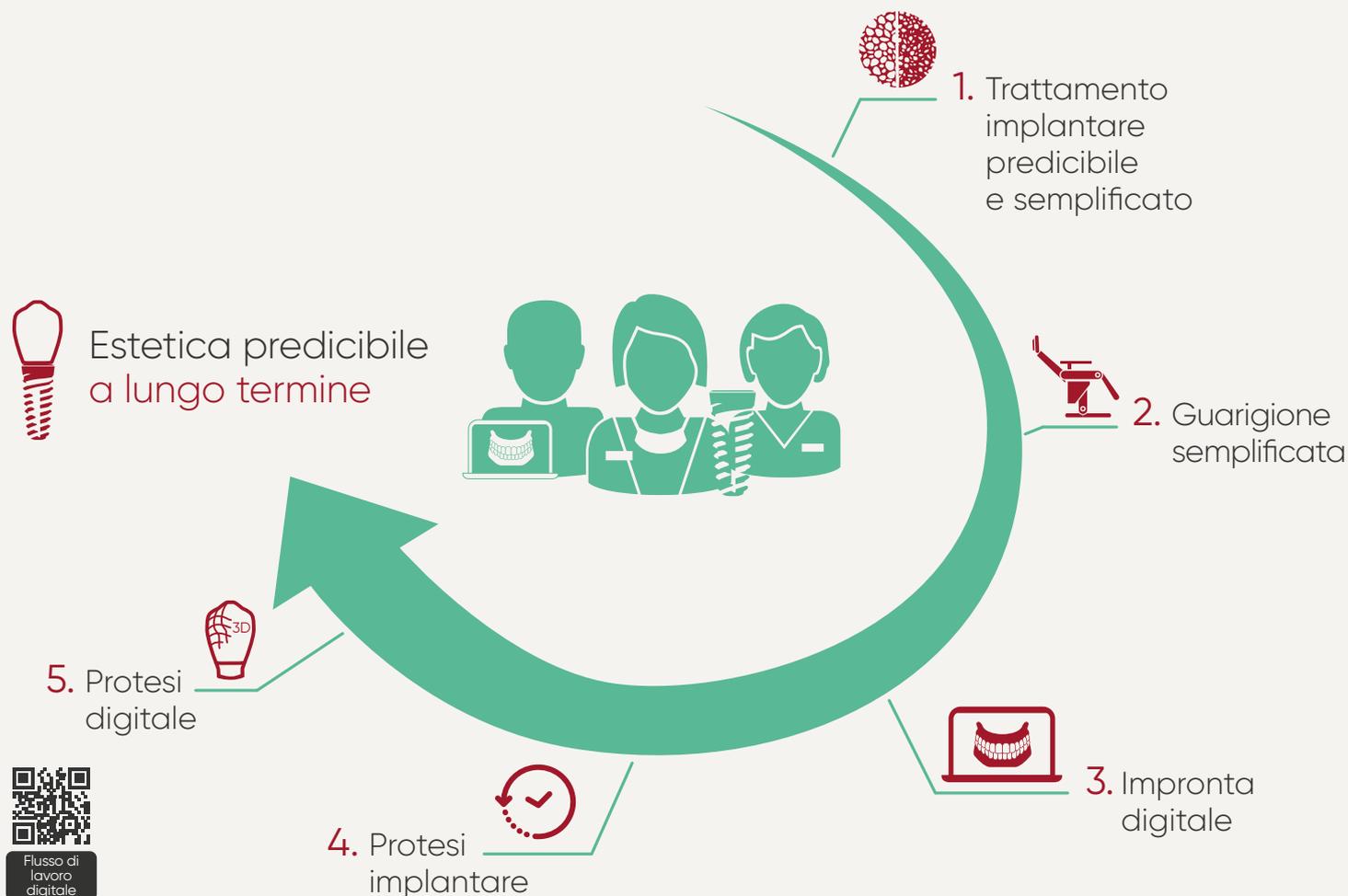

Ordina i tuoi prodotti **24 ore su 24, 7 giorni su 7 nel nostro Online Store** all'indirizzo shop-it.neoss.com



Assortimento e garanzie

NeoScan™ 1000

N. art.	Descrizione
91000	Scanner intraorale NeoScan 1000 <i>Include manipolo, 4 puntali (2×S, 2×L), set di supporti, manuali, valigia. È possibile acquistare un'estensione della garanzia.</i>
91012	NeoScan 1000 – Puntale L TP102N (2 pz.)
91013	NeoScan 1000 – Puntale S TP103N (2 pz.)
91022	Carrello per scanner intraorale
91024	NeoScan 1000 – Estensione della garanzia – 1 anno
91026	NeoScan 1000 – Estensione della garanzia – 2 anni
91027	NeoScan 1000 – Estensione della garanzia – 3 anni

NeoScan™ 2000

N. art.	Descrizione
91001	Scanner intraorale NeoScan 2000 <i>Include manipolo, 4 puntali (2×S, 2×L), supporto di ricarica, 2 batterie, supporto, manuali, adattatore Wi-Fi, valigia. È possibile acquistare un'estensione della garanzia.</i>
91014	NeoScan 2000 – Puntale L TP102N (2 pz.)
91015	NeoScan 2000 – Puntale S TP103N (2 pz.)
91040	NeoScan 2000 – Batteria (2 pz.)
91032	NeoScan 2000 – Estensione della garanzia – 1 anno
91033	NeoScan 2000 – Estensione della garanzia – 2 anni
91034	NeoScan 2000 – Estensione della garanzia – 3 anni

Neoss Italia S.r.l

Viale Certosa 138, I-20156 Milano

T: +39 02 92952 1

E: italia@neoss.info

E: NeoScan: neoscan.support.it@neoss.com

Per assistenza, visita la nostra pagina Web:

neoss.com/it/neoscan1000

Assistenza clienti NeoScan: +39 (0)2 92952400

Contatta il tuo rappresentante locale per i dettagli sulla disponibilità dei prodotti. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i mercati.

15982_0 IT 23-08 © Neoss Group, 2023. I copyright, i diritti su design e i marchi registrati e i documenti, il software e i design di Neoss non possono essere ristampati, copiati o pubblicati, integralmente o parzialmente, senza l'autorizzazione scritta di Neoss Group. Neoss e il logo N sono marchi registrati di Neoss Group. NeoScan™, NeoPro® e NeoConnect® sono marchi registrati di Neoss Group. Le immagini dei prodotti non sono necessariamente in scala.